





612-0012-9850 ICE 4 3/4" x 6 1/2

ICE KOLD®

COMPRESA FRÍA INSTANTÁNEA

Desechable, un solo uso
Úsela sólo como se indica, no debe aplicarse directamente sobre la piel • Se recomienda activarla entre 32° y 80° F (0° y 26.6° C)
Sólo para uso externo

- 
Sacuda el contenido hacia el fondo de la bolsa. Ubique la bolsa interior y apriete firmemente para romper la bolsa de agua.
- 
Sacuda brevemente para mezclar el contenido y asegurar la activación.
- 
Envuelva la compresa en un paño suave y aplique sobre la zona a tratar.
- 
Deshágase de ella luego de usarla.

PRECAUCIÓN:

No la vuelva a usar. Debe guardarse en un lugar seco a temperatura ambiente. No la coloque en el refrigerador o congelador ya que puede causar quemaduras por congelación. Siempre envuelva la compresa en un paño suave antes de aplicarla sobre la zona a tratar; no la aplique directamente sobre la piel. No la use durante más de 30 minutos; temperatura aproximada y tiempo terapéutico: 33° F / 0.5° C, 20 minutos. Para uso externo solamente. Luego de un único uso deshágase de ella en forma apropiada. No use la bolsa si está perforada, rota o gotea.

ADVERTENCIA:

Úsela con cuidado. Puede causar quemaduras graves. No la use sobre zonas de la piel sensibles o si tiene mala circulación. El uso no supervisado de la Compresa Fría Instantánea Ice Kold® por niños o personas discapacitadas puede ser peligroso. No se recomienda la terapia de frío para personas que padecen de problemas circulatorios, Síndrome de Raynauds o diabetes sin el consentimiento de su médico.

Es dañino si se traga. Si se traga, obtenga atención médica inmediatamente. Si la víctima está somnolienta o vomita, no le de nada por vía oral. Si la víctima está consciente y alerta y la ingestión ocurrió dentro de la última hora, induzca el vómito.


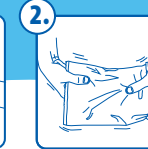
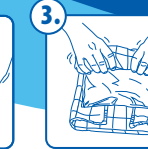

Si el líquido entra en contacto con los ojos o una herida abierta, irriéguela con agua y obtenga atención médica. Si el líquido entra en contacto con la piel, quite la ropa contaminada y lave la zona con agua y jabón neutro. Obtenga atención médica si persisten los síntomas, inclusive irritación o enrojecimiento. No debe aplicarse directamente sobre la piel.

Ingredientes Activos: Nitrato de amonio, Agua

ICE KOLD®

INSTANT ICE COMPRESS

Disposable, single use only
Use only as directed, do not apply directly to skin
Best if activated between 32° and 80° F (0°-26.6° C)
For external use only

- 
Shake contents to the bottom of the bag. Locate inner pouch and squeeze firmly to rupture water pouch.
- 
Shake briefly to mix contents and ensure activation.
- 
Wrap compress in a soft cloth and apply to treatment area.
- 
Discard after single use.

CAUTION:

Do not reuse. Store in a dry place at room temperature. Do not refrigerate or freeze as this may result in frostbite. Always wrap compress with a soft cloth before application to treatment area; do not apply directly to skin. Do not use for more than 30 minutes; approximate temperature and therapeutic time: 33° F / 0.5° C, 20 minutes. For external use only. Properly dispose of after single use. Do not use bag if it is punctured, torn or leakage occurs.

WARNING:

Use carefully. May cause serious burns. Do not use over sensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of Ice Kold® Instant Ice Compress by children or incapacitated persons may be dangerous. Cold therapy is not recommended for people with circulatory problems, Raynauds Syndrome or diabetes without consent by your physician.

Harmful if swallowed. If swallowed, seek emergency medical attention immediately. If victim is drowsy or vomiting, do not give anything by mouth. If victim is conscious and alert and ingestion occurred within the last hour, induce vomiting.


If fluid comes in contact with eyes or open wound, flush with water and seek medical attention. If fluid comes in contact with skin, remove any contaminated clothing and wash the area with mild soap and water. Seek medical attention for any persistent symptoms including irritation or redness. Do not apply directly to skin.

Active Ingredients: Ammonium Nitrate, Water

DMi
DURO-MED INDUSTRIES
Lifestyle Products for Better Living


Distributed by:
Duro-Med Industries
Div. of DMS Holdings Inc.
1931 Norman Drive South
Waukegan, IL 60085 USA
www.mabisdmi.com
Made in China

612-0012-9850



0 4 1298 21212 6

#940-0612-0012 01/09
©2009 Duro-Med Industries



pms 2915



pms 286